

TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice®



充実の国内サポート体制



TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice® Touch

製品コード TP350 価格(税別) ¥580,000

- ★ 入力しやすい7インチの大型カラータッチパネルを採用
- ★ ウィザードメニューにより、簡単プログラミング。すぐにPCRをスタート
- ★ 省エネルギー(100V、5A)、軽量(5 kg)
- ★ A4サイズに収まるコンパクトなデザインで置き場所を選ばない

TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice® Gradient

製品コード TP600 価格(税別) ¥550,000

- ★ スライド&レバー式カバーハンドルの採用で、サンプルのセットが簡単。低い場所への設置も可能
- ★ 可動式コントロールパネルで、表示画面が見やすく操作が簡単
- ★ タカラバイオのPCR装置旧機種等との互換性モードを搭載
- ★ 前面、側面吸気、後方排気により、装置間の熱干渉の低減を実現




仕様	Dice Touch	Dice Gradient
製品コード	TP350	TP600
価格(税別)	¥580,000	¥550,000
温度設定範囲	4~99°C (0.1°C単位)	4~99.9°C (0.1°C単位)
温度精度	±0.5°C (30~99°C)	±0.5°C (30~99°C)
温度均一性	±0.3°C (30~99°C)	±0.5°C (30~99°C)
保存プログラム数	10,000以上	200
最大サイクル数	200	99
タッチダウンPCR	可能	可能
グラジエント機能	12段階 設定可能範囲: 4~99°C (温度幅: 0~24°C)	設定可能範囲: 40~75°C (温度幅: 6~20°C)
処理検体数	最大 96	最大 96
外形寸法	180(W) × 285(D) × 205(H) mm	260(W) × 345(D) × 260(H) mm
重量	5.0 kg	11.5 kg

TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice® シリーズ



◆ TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice® Touch (製品コード TP350)

- ・7インチの大型カラータッチパネルカラーモニター
- ・ウィザードメニューにより、簡単にプログラミング

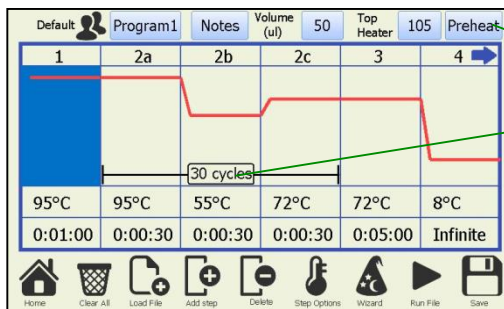

- ・ボタン1つでPreheatを設定
- ・数字の部分をクリックすると入力画面が現れ、温度、反応時間、サイクル数の変更が可能
- ・各アイコンを用いて簡単にプログラムを作成

- ・プログラムファイルの内容を表示
- ・Post Run Reportの履歴内容も確認可能
- ・Historyアイコンで最近使用したプログラムを起動

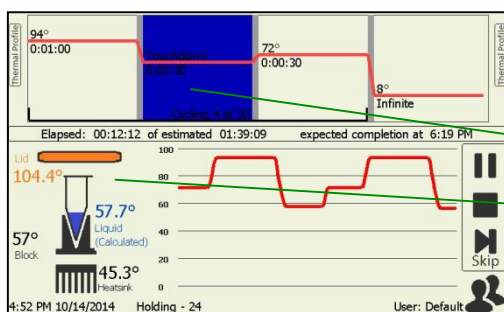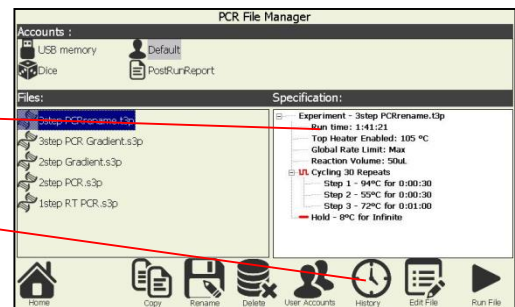

- ・一目で現在の反応内容を確認
- ・ブロックやヒーターの反応中の温度を表示
- ・新しくSkip機能を追加

・本チラシで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。 ・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
 ・本チラシに記載された社名および製品名は、特に記載がなくても各社の商標または登録商標です。 ・ライセンス情報については弊社ウェブサイトにてご確認ください。
 ・本チラシ記載の価格は2018年6月1日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2018年6月作成G

タカラバイオ株式会社

東京支店 TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282
 関西支店 TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995
 テクニカルサポートライン
 TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995
 ウェブサイト <http://www.takara-bio.co.jp>
 Facebook <http://www.facebook.com/takarabio.jp>

取扱店