

1液タイプ

調製済みの反応液でさらに簡便に

EHEC・サルモネラ／赤痢菌を検出！

製品名		容量	製品コード	価格(税別)
TaKaRa腸管系病原細菌遺伝子検出キット (3波長) 1液タイプ		200回	RC154A	¥168,000
内容	TaKaRa腸管系病原細菌遺伝子検出qPCR試薬 (3波長) 1液タイプ	200回	RC155A	¥150,000
	Lysis Buffer for stool test ※	90 ml	9187	¥18,000


それぞれの構成商品は単品でも販売しています。

※大容量品(製品コード9188)もご用意しています。詳しくは裏面をご参照ください。

● 反応液が調製済み！前処理済みサンプルを添加するだけ

マスターミックス調製の手間が不要で、より安定した検査が可能です。

● 前処理は付属のLysis Bufferと検便検体を混合し5分で完了

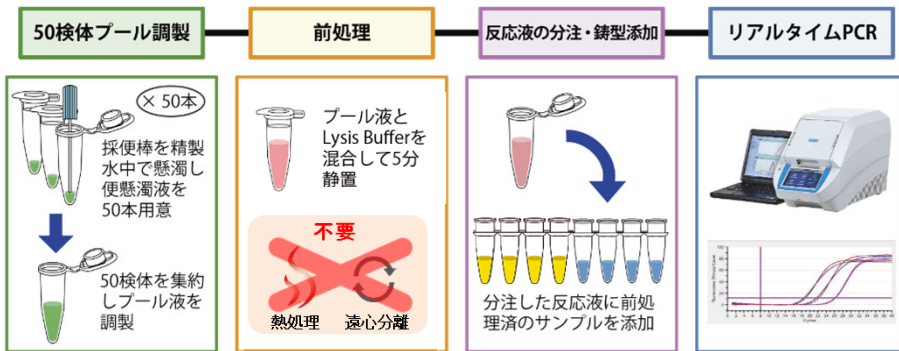


<キットの内容>

TaKaRa腸管系病原細菌遺伝子検出qPCR試薬(3波長) 1液タイプ (製品コード RC155A)

- qPCR Perfect Mix (VT/ipaH+invA)
- Positive Control Mix 3


Lysis Buffer for stool test (製品コード 9187)
Lysis Buffer for stool test

● 鑄型添加を色でチェック可能

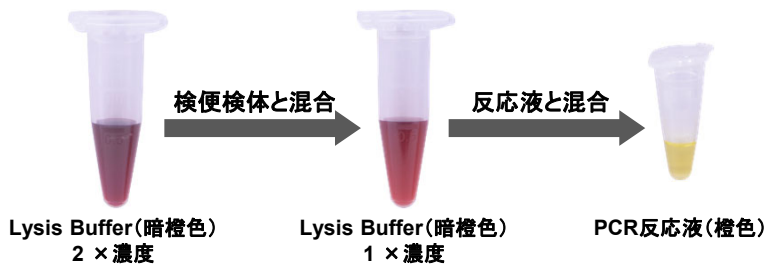

● 1チューブでEHEC、サルモネラ属菌／赤痢菌、インターナルコントロールを検出

<判定イメージ>

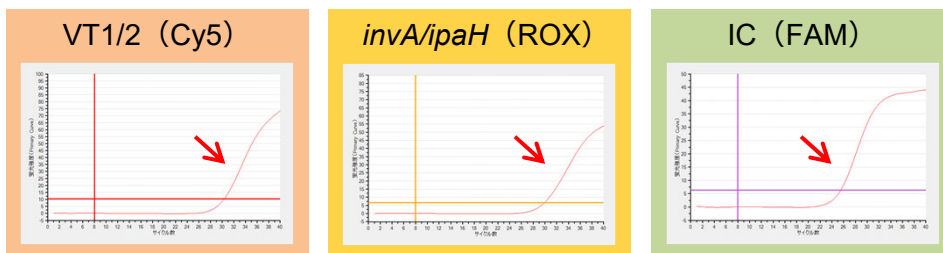


● PCR増幅産物のキャリーオーバーによる偽陽性を防止

PCRは非常に高感度な検出方法であるため、以前に行ったPCR増幅産物のキャリーオーバーによる偽陽性が生じる場合があります。本製品では、UNG(ウラシル-N-グリコシラーゼ)の働きにより、キャリーオーバーしたPCR産物を分解するため、偽陽性を防止することができます。

TaKaRa腸管系病原細菌遺伝子検出キット（3 波長）1液タイプ

◆ 遺伝子検査によるスクリーニング

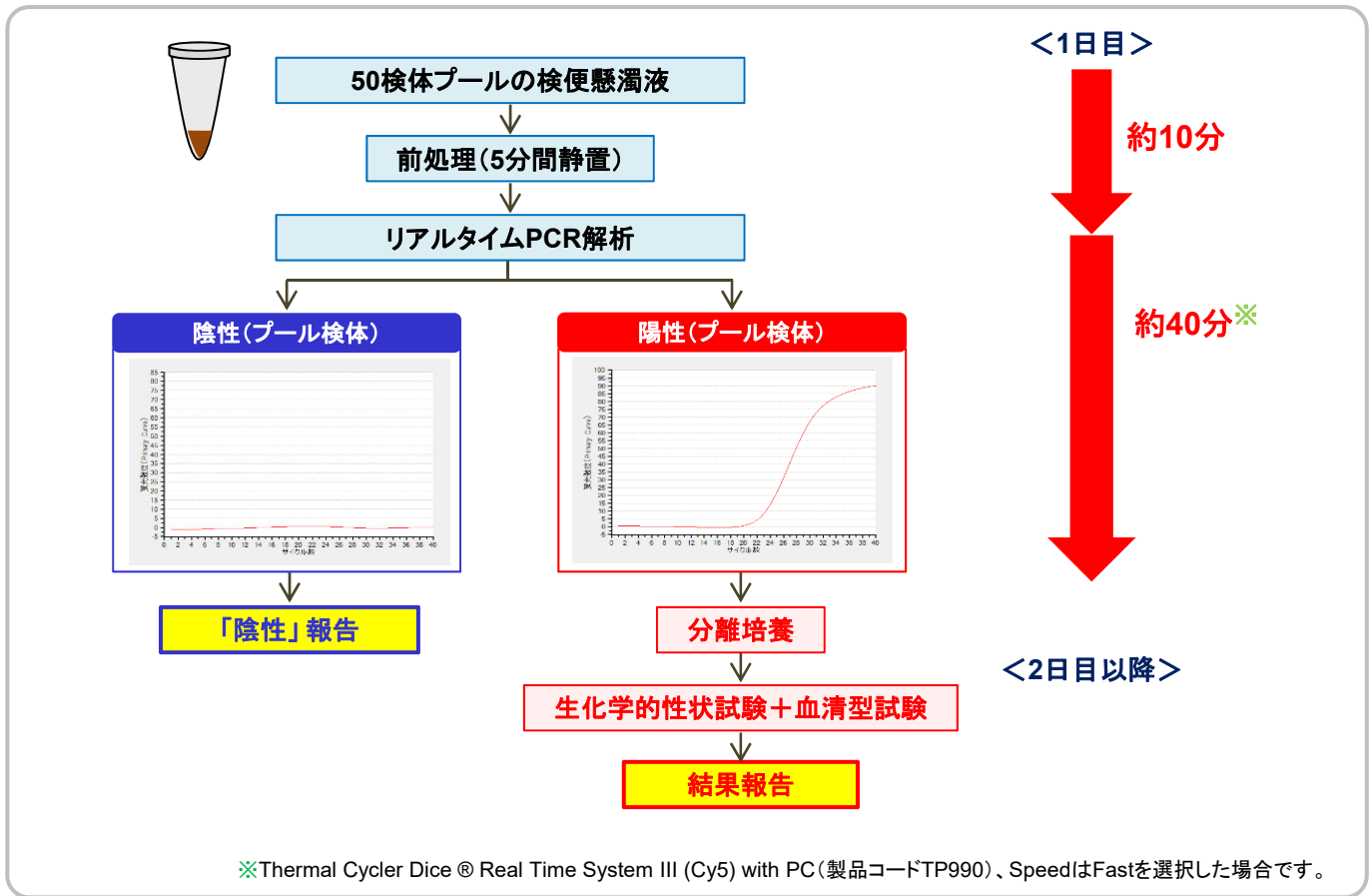

◆ 本キット対応機種

- Thermal Cycler Dice Real Time System III (Cy5) with PC(製品コード TP990)
- Thermal Cycler Dice Real Time System *Lite*(製品コード TP700/TP760:終売)
 - ※ TP700/TP760 は、Cy5 オプションフィルターの追加が必要です。
 - Filter Unit(Cy5) for LED(製品コード TP703)

その他のリアルタイム装置に関してはTaKaRa腸管系病原細菌遺伝子検出キット(4波長)1液タイプ(製品コードRC150A)をご覧ください。

◆ 関連製品

製品名	概要	容量	製品コード	価格(税別)
Lysis Buffer for stool test の大容量品				
Lysis Buffer for stool test	9187の大容量版 (500 ml 容量ボトルを使用)	360 ml	9188	¥72,000
プローブ法による検出(4波長)				
TaKaRa腸管系病原細菌遺伝子検出キット(4波長)1液タイプ	反応液が調製済みで、4波長同時検出のリアルタイムPCR装置に対応	200回	RC150A	¥168,000

- ・本チラシで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
- ・本チラシに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。
- ・ライセンスなどに関する最新の情報は弊社ウェブサイトをご覧ください。
- ・本チラシ記載の価格は2024年10月1日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2024年10月作成N

タカラバイオ株式会社

営業部(東京) TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282
 営業部(本社) TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995
 テクニカルサポートライン TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995
 Website <https://www.takara-bio.co.jp>
 公式X @Takara_Bio_JP / https://x.com/Takara_Bio_JP

取扱店