

# 次世代シーケンス (MiSeq) 向け 細菌叢解析用PCRキット 半額キャンペーン


キャンペーン期間: 2017年5月8日(月)~2017年7月31日(月)まで

## 16S (V3-V4) Metagenomic Library Construction Kit for NGS

50回包装(製品コードR161A)

通常価格

96,000円

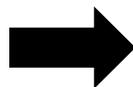


キャンペーン価格

48,000円

100回包装(製品コードR161B)

通常価格

180,000円

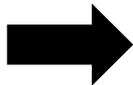

キャンペーン価格

90,000円



でご提供!

※表示価格は税別です。

### <キットの内容>

1. 2× Gflex PCR Buffer (Mg<sup>2+</sup>, dNTP plus)
2. Tks Gflex DNA Polymerase
3. 16S V3-V4 Primer Mix
4. H<sub>2</sub>O



(注) ライブラリー作製には、本キットの他、以下の製品もご用意ください。

- ・Nextera XT Index Kit (イルミナ社)
- ・Agencourt AMPure XP (Beckman Coulter社)

✓ 土壌・環境水にどのような細菌がどれくらい存在しているかを調べたい!

✓ 食生活や病気による腸内フローラの変化を調べたい!

### ◆ Tks Gflex™ の採用でPCRの増幅バイアスを低減

サンプル中の細菌DNAの構成比が保持されやすいTks Gflex™ DNA Polymeraseを採用しています。

### ◆ 品質検定済みの専用キット

プライマーとPCR酵素をセットにしており、試薬の管理や品質チェックが不要で、すぐにご使用いただけます。

### ◆ Nextera XT Index Kit (イルミナ社) と組み合わせて至適化

一定品質のライブラリーが得られ、より簡便に安定した解析データを取得できます。

### ◆ MiSeq (250ペアエンドリード) での解析に最適な16S rRNA遺伝子V3-V4領域を採用

裏面もご覧ください ⇒


～ 細菌叢解析の流れ ～

DNA抽出

ゲノムDNA抽出キット

<糞便試料用> NucleoSpin® DNA Stool (製品コード740472.10/.50)

サンプル品あります

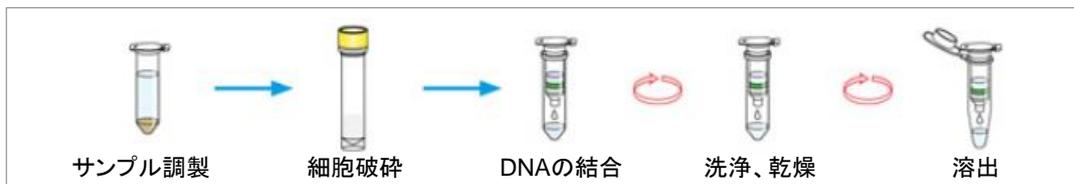


<土壌試料用> NucleoSpin® Soil (製品コード 740780.10/.50/.250)

サンプル品あります

本キット使用工程


ターゲット領域の増幅

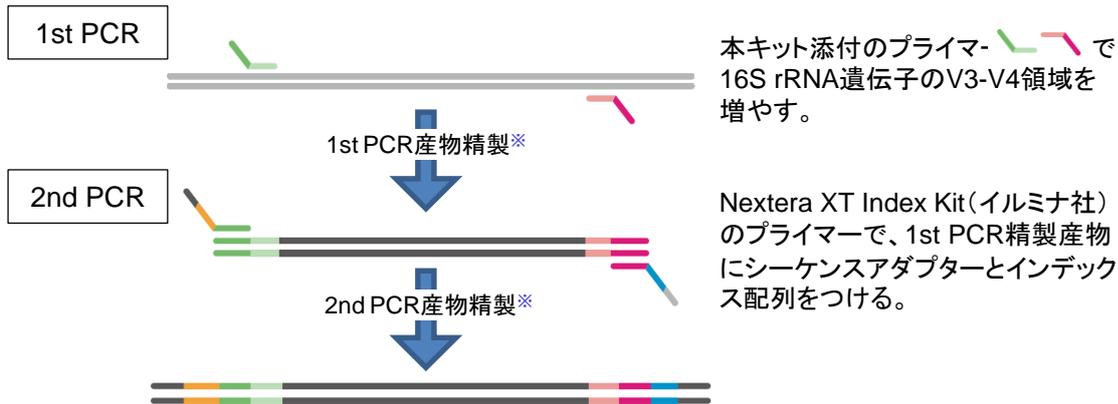

※PCR産物の精製には、Agencourt AMPure XP (Beckman Coulter社、製品コード A63880/A63881/A63882)を推奨しています。

ライブラリーの増幅

ライブラリー混合・定量

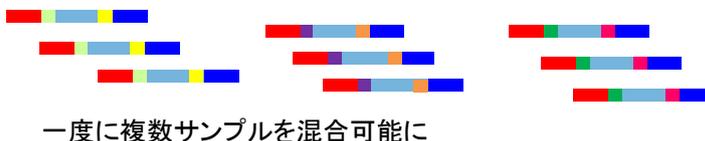

次世代シーケンス

本キットでは、イルミナ社次世代シーケンサーMiSeqの250ペアエンドでのシーケンスを推奨しています。



■関連製品

用途	製品名	容量	製品コード	価格(税別)
糞便試料用ゲノムDNA精製カラム	NucleoSpin® DNA Stool	50回	740472.50	¥40,000
土壌試料用ゲノムDNA精製カラム	NucleoSpin® Soil	50回	740780.50	¥43,000

【参考情報】 16S rRNA遺伝子V3-V4領域をTks Gflexで増幅した結果が、最も忠実に元サンプルの細菌叢構造を反映していることを示唆したデータは、第38回日本分子生物学会年会/第88回日本生化学会大会合同大会にてポスター発表しております。

演題: 3LBA007「The effect of DNA Polymerase on the assessment of bacterial community analysis」  
 演者: 木口 悠也<sup>1</sup>、蘆田 尚子<sup>1</sup>、辻本 善政<sup>1</sup>、鳥田 雅光<sup>1</sup>、北川 正成<sup>1</sup> (1: タカラバイオ・バイオメディカルセンター)

・本チラシで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。  
 ・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。  
 ・本チラシに記載された社名および製品名は、特に記載がなくても各社の商標または登録商標です。  
 ・ライセンス情報については弊社ウェブサイトにてご確認ください。  
 ・本チラシ記載の価格は2017年5月8日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2017年5月作成N

タカラバイオ株式会社

東京支店 TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282  
 関西支店 TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995  
 テクニカルサポートライン  
 TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995  
 ウェブサイト <http://www.takara-bio.co.jp>  
 Facebook <http://www.facebook.com/takarabio.jp>

取扱店