

QuickPrimer Nhe 遺伝子


Code No. MR113

容量： 100 回


(20 μ l 反応系)

濃度： 2.0 μ M each

増幅曲線

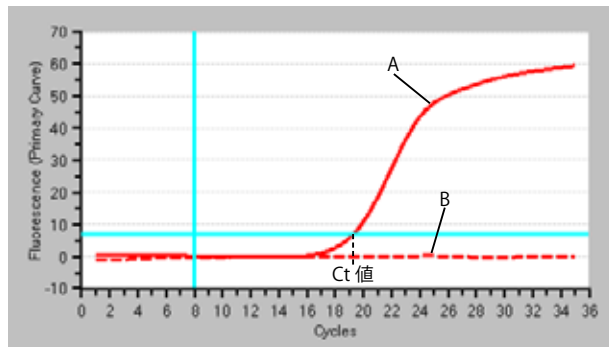

融解曲線 (1st Derivative)

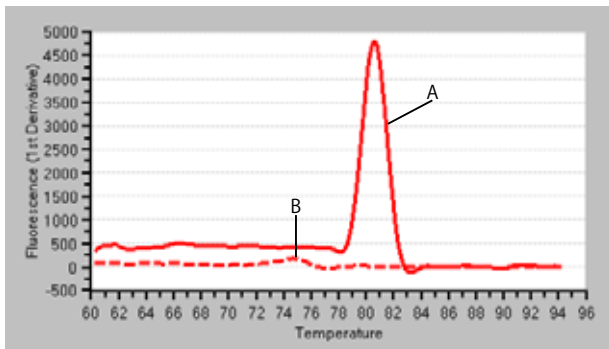

本製品は必ず TB Green® *Premix Ex Taq*™ (Tli RNaseH Plus) (製品コード RR420S/A/B) と組み合わせてご使用ください。使用方法については、取扱説明書をご確認ください。

- 検出対象遺伝子 非溶血性腸管毒 Nhe 遺伝子
- 内容 Primer Mix (5 ×)
Forward Primer および Reverse Primer
- 形状 TE 溶液
- 保存 - 20°C

● 製品説明

本製品は、TB Green *Premix Ex Taq* (Tli RNaseH Plus) (製品コード RR420S/A/B) に適化された非溶血性腸管毒 Nhe 遺伝子検出用のリアルタイム PCR プライマーである。
増幅曲線より得られた Ct 値、および融解曲線分析より得られた Tm 値が、判定基準に一致するかどうかで目的遺伝子の検出の判定を行う。

● 判定基準

1. 増幅曲線より得られた Ct 値が 35 より小さい。
2. 融解曲線のパターンが陽性コントロール DNA (10 倍希釈液) を用いた場合と同じパターンを示す。
陽性コントロール DNA : QuickPrimer Control DNA 15 (製品コード MR415)
3. 融解曲線分析より得られた Tm 値が、陽性コントロール DNA (10 倍希釈液) の Tm 値 ± 1.5°C の幅に含まれる。

1 ~ 3 が満たされた時、陽性と判断する。

※ 精製ゲノム DNA 10 pg ~ 100 ng を用いた場合、上記の判定で陽性になることを確認している。

● 増幅鎖長 152 bp

● 注意事項

- ・ 最終的な結果判定については、遺伝子検査だけではなく、培養検査などの他の微生物検出方法の結果とも照らし合わせて、総合的に判定されることをお勧めします。
- ・ 使用方法および注意事項等の詳細は、取扱説明書をご確認ください。

Thermal Cycler Dice® Real Time System での解析例

- A : 陽性コントロール DNA
- B : 陰性コントロール (滅菌精製水)

TB Green、Thermal Cycler Dice はタカラバイオ株式会社の登録商標です。
Premix Ex Taq はタカラバイオ株式会社の商標です。

● 注意

本製品は食品分析および環境分析用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。検査結果判定により発生する問題に関してタカラバイオ株式会社は一切の責任を負いません。
タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
ライセンスに関する情報は弊社ウェブカタログをご覧ください。
本データシートに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。

v201903

タカラバイオ株式会社

ウェブサイト <http://www.takara-bio.co.jp>

製品についての技術的なお問い合わせ先

テクニカルサポートライン

Tel 077-565-6999

Fax 077-565-6995

QuickPrimer Nhe 遺伝子

● 検出確認リスト

本検出リストは、岐阜大学大学院 医学系研究科病原体制御学分野 教授 江崎孝行先生にご提供いただいたデータを元に作成しています。

※本データは、1 ng/assay での検討結果です。

(T) : Type strain

病原体 (ラテン語名)	Quick Primer	
	MR113	MR208
	Nhe	16S rDNA (<i>B. cereus</i> group)
<i>Bacillus cereus</i> GTC 11403	+	+
<i>Bacillus thuringensis</i> GTC 2829(T)	-	+
<i>Bacillus pseudomycoloides</i> GTC 2830(T)	-	+
<i>Bacillus mycoloides</i> GTC 2830(T)	-	+
<i>Bacillus weihenstephanensis</i> GTC 2834(T)	-	+
<i>Bacillus circulans</i> GTC 2838(T)	-	-
<i>Bacillus subtilis</i> GTC 2846(T)	-	-
<i>Bacillus pumilus</i> GTC 827(T)	-	-
<i>Bacillus brevis</i> (<i>Brevibacillus brevis</i>) GTC 2855	-	-
<i>Bacillus megaterium</i> GTC 2850(T)	-	-
<i>Bacillus sphaericus</i> GTC 2845(T)	-	-
<i>Bacillus licheniformis</i> GTC 2840(T)	-	-
<i>Bacillus psychrophilus</i> (<i>Sporosarcina psychrophila</i>) GTC 2843(T)	-	-
<i>Bacillus alcalophilus</i> GTC 1270(T)	-	-
<i>Bacillus okuhidaensis</i> GTC 854(T)	-	-
<i>Bacillus halodurans</i> GTC 1693(T)	-	-
<i>Bacillus atrophaeus</i> GTC 1271(T)	-	-
<i>Bacillus badius</i> GTC 2836(T)	-	-
<i>Staphylococcus aureus</i> GTC 286(T)	-	-
<i>Staphylococcus intermedius</i> GTC 266(T)	-	-
<i>Staphylococcus epidermidis</i> GTC 289(T)	-	-
<i>Staphylococcus hominis</i> GTC 48(T)	-	-
<i>Staphylococcus saccharolyticus</i> GTC 181(T)	-	-
<i>Staphylococcus schleiferi</i> GTC 483(T)	-	-
<i>Staphylococcus delphini</i> GTC 476(T)	-	-
<i>Staphylococcus carnosus</i> GTC 384(T)	-	-
<i>Staphylococcus simulans</i> GTC 292(T)	-	-
<i>Staphylococcus warneri</i> GTC 293(T)	-	-

<ご注意>

本データは、TB Green *Premix Ex Taq* (Tli RNaseH Plus) の旧バージョン (製品コード RR041A/B、販売終了) を用いて確認しています。